



MİPROLAB

PERMABİLİTE CİHAZI

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

Cihaz toprak su geçirgenlik testlerinde kullanılır.

Aynı anda 10 numune ile çalışır.

Su tasarrufu açısından kapalı sistemdir.

Pompa yardımı ile sürekli devirdaim yapar.

Su içerisinde hiç kapatmadan 48 saat çalışan pompa.

Su tankı ve su flitresi.


53 mm ve 60 mm numune alma halkalarına uygun tasarım.

10 adet numune halkası.

Sert plastikden permeabilite kabı ile 53-60 mm çaplı dikişsiz paslanmaz çelikten yapılmış örnek alma silindiri sayesinde numuneyle birlikte dışından su geçirmeyecek şekilde takılabilir tasarım.

Elektrostatik toz boya ile mukavemetli gövde.

220 V, 50 Hz.

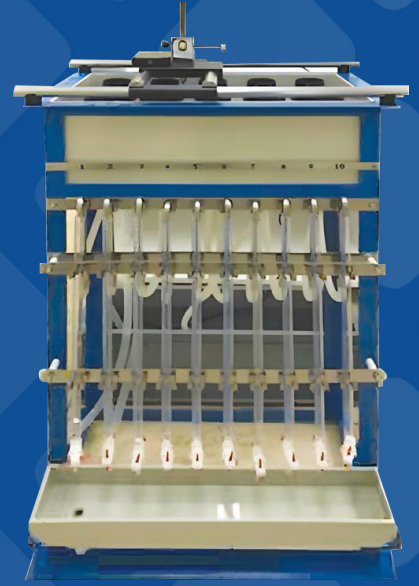

BASINÇLI SÜZME DÜZENİĞİ

Saturasyon çamuru ekstraktının hava basıncı ile hızlı, güvenilir ve kolay çıkartılmasını sağlar.

Kullanımı kolay ve pratik olup, sistemdeki her bir ünite 350 kg'lık basınca dayanıklıdır.

Sistemin sızdırmazlığı özel tasarım ile sağlanmaktadır.



MİPROLAB

MİPROLAB LABORATUVAR CİHAZLARI A.Ş.

AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ SİTESİ 1362. CAD. NO:41 YENİMAHALLE/ANKARA

Tel: 0312 395 75 55 | Whatsapp: 0542 395 75 56 | E-posta: info@miprolab.com.tr

