



MIPROLAB

MFH SERİSİ ÇEKER OCAKLAR

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim


MFH serisi çeker ocaklar; laboratuvar içerisinde yapılan test ve deneyler esnasında ortaya çıkan, gaz, ısı, asit buharı ve kokunun laboratuvar ortamına yayılmadan egzost (emiş sistemi) ile güvenli bir şekilde tahliye olmasını ve kullanıcıların ise koruyucu cam sayesinde zararlı maddelere karşı güvenli çalışmasını sağlayan kabinlerdir.

SAĞLAM ASPIRASYON KABİNİ

Aside dayanıklı, KOMPAKT, GRAPOL veya ENDÜSTRİYEL SERAMİK malzeme.

İsteğe bağlı olarak sunulan PP evye, Su Fittingi ve Gaz Fittingi ile rahat kullanım sağlar. Su ve Gaz Fittingleri panodan kontrol sayesinde kullanıcı dostudur.

Cihazın iç yapısında PVC, polipropilen, paslanmaz çelik fırın, boyalı sac bulunmaktadır.

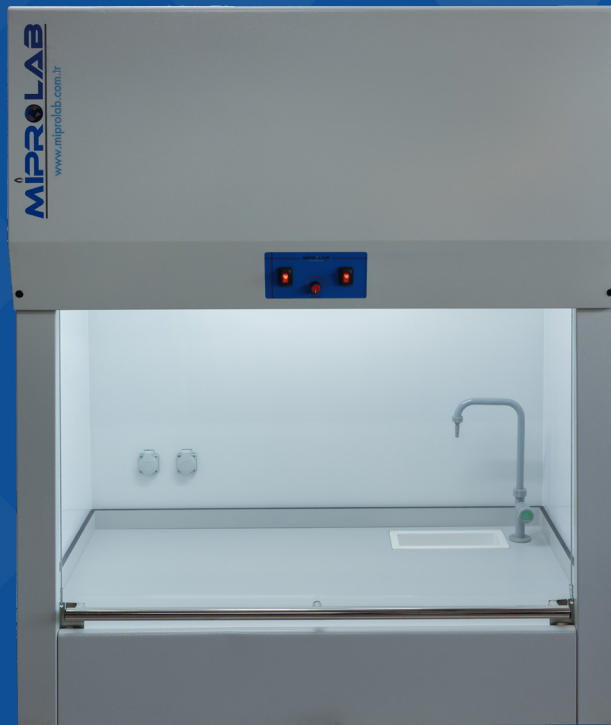

GÜVENLİ VE EŞSİZ TASARIM

Cihazın tüm dış metal aksamı elektrostatik fırın boyalıdır.

Metal ayaklar veya özel dolabı üzerine monte edilebileceği gibi laboratuvar tezgahı üzerine de yerleştirilebilir.

Kabin aydınlatması floresan lamba ile sağlanmaktadır. İç panelde iki adet priz bulunmaktadır.

(220V, 50Hz) Kabin ön camı temperlenmiş camdan üretilmiş, çerçeveli giyotin şeklindedir.

GÜÇLÜ MOTOR

Hava emiş motoru asit ve asit buharına dayanıklı PP (plastik) malzemeden yapılmıştır.

Kullanılan motor gücü 2650 devir, 1000-5000 m3 kadar fan seçeneği.

Motor hızı kademeli olarak ayarlanabilir ve hız kontrol ünitesi ile aç/kapa anahtarı cihazın ön panelinde yer almaktadır.

Hızı ayarlanabilir asitlere karşı dayanıklı PVC fan.

	MFH-90	MFH-120	MFH-150	MFH-180
İÇ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	860x1000x660	1160x1000x660	1460x1000x660	1760x1000x660
DIŞ ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	900x2230x700	1200x2230x700	1500x2230x700	1600x2230x700
NET AĞIRLIK (kg.)	98	110	122	134
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	108	121	134	147

CİHAZ BOYLARI AYAK DAHİL ÖLÇÜLERDİR, AYAK BOYU 780 MM'DİR.

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program),
- 4.3 / 5.5 VE 7.2 İnç Ekran Seçenekleri,
- Dijital ekran (dokunmatik ekran),
- Kabin sıcaklığının gösteren sistem,
- Dijital hava akış hızını gösteren sistem,
- Özel ölçülerde ve farklı özelliklerde üretim,
- Aspirasyon kabininde kullanmak üzere pano kontrollü gaz,
- yanıcı gaz ve su fittingleri kullanıcının isteğine göre yerleştirilebilir,
- Aspirasyon kabini içine PP evye,
- Otomatik açılıp kapanabilen ön cam,
- Cihaz ile birlikte kullanılabilen malzeme dolabı eklenebilmektedir,
- PP fan.
- Ön panele priz seçeneği.

