




MIPROLAB

MJF SERİSİ JARTESTLER

*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

MJF Serisi Jartestler, Jartesti için en uygun ve elverişli şekilde üretilmiş cihazlardır. Jartesti belirli bir su tesisinde kullanılan arıtma kimyasallarının pilot ölçekli testidir. MJF serisi Jartest cihazları ile karıştırma hızı, karıştırma ve çöktürme zamanı, koagülant, pH ayarı gibi pek çok veri elde edilebilmektedir.

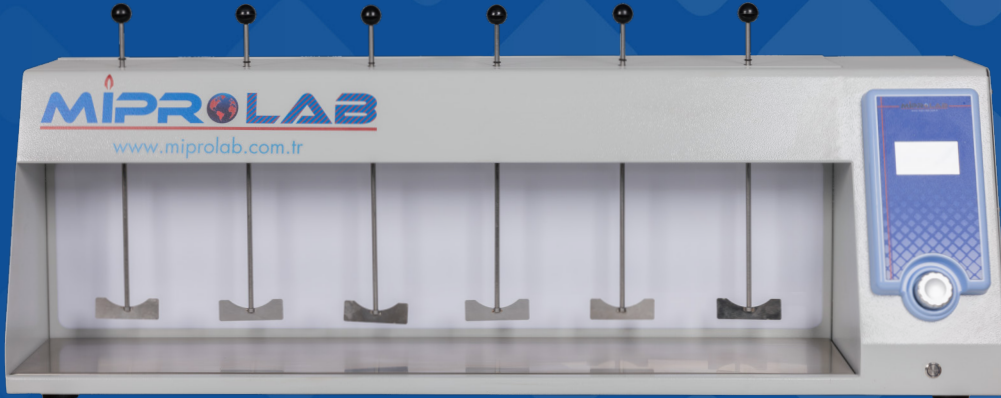

MJF-A JARTEST

Tek motor gücü ile aynı anda eşit hızla çalışabilme imkanı sağlamaktadır.

DONANIMLI ÖZELLİKLER

- Her karıştırma çubuğu için aynı hız,
- Mikroişlemci kontrollü zamanlayıcısı ile cihaz yanında beklemeden çalışabilir ve süre sonunda otomatik durur,
- Programlanabilir dijital kontrol ünitesi, Grafik Likit Kristal Gösterge (GLCD),
- Tek kontrol butonu ile kolay kullanım, kilitleme özelliği,
- 6'lı flokülasyon platformu,
- Gövde Malzemesi Epoksi kaplı metal,
- Kullanıcıya kolay kullanım sağlayan, aletsiz olarak yüksekliği ayarlanabilen karıştırma çubukları,
- Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar ile kullanıcı dostu kullanım,
- Elektronik olarak kontrol edilen DC dişli motoru ile hassas ve doğru hız,
- Arka yüzey Sökülebilir şekilde ışıklandırılmış,
- DC motor.

MJF-6A JARTEST

Altı ayrı motor gücü ile aynı anda farklı hızla çalışabilme imkanı sağlamaktadır.

DONANIMLI ÖZELLİKLER

- Her karıştırma çubuğu için aynı hız,
- Tek kontrol butonu ile kolay kullanım, kilitleme özelliği,
- 6'lı flokülasyon platformu,
- Gövde Malzemesi Epoksi kaplı metal,
- Kullanıcıya kolay kullanım sağlayan, aletsiz olarak yüksekliği ayarlanabilen karıştırma çubukları,
- Arka yüzey Sökülebilir şekilde ışıklandırılmış,
- Güvenilir ve tekrarlanabilir sonuçlar ile kullanıcı dostu kullanım,
- Elektronik olarak kontrol edilen DC dişli motoru ile hassas ve doğru hız,
- DC motor.

	MJF-A JARTEST	MJF-6A JARTEST
HIZ AYARI	30 ile 300 rpm arasında farklı hızlarda çalışma imkanı	
HIZ AYAR HASASİYETİ	10 rpm	
İÇ YÜZEY YAPISI	Paslanmaz çelik karıştırma çubukları; ayarlandığı pozisyonda duran sapı ile yükseklik ayarı yapılabilir	
ZAMANLAYICI	Hız ve zaman (1 dk-99,9 saat/sürekli) için GLCD gösterge	
GÜÇ DEĞERLERİ	220 V, 50 Hz şehir elektriği ile çalışma	
KURULU GÜÇ	Güç 10-20 W	
ÖLÇÜLER (EXBXD) mm	1100x400x300	940x400x300
NET AĞIRLIK (kg.)	21	20
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	23	22

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program).