



MİPROLAB

MLAF SERİSİ LAF KABİNLERİ


*Özel Ölçü
ve Özelliklerde
Üretim

Mipro MLAF Serisi Çalışma Kabinleri, mikrobiyolojik çalışmalarda, ürün, numune ve çalışma materyallerinin kontaminasyonunun engellenmesi amaçlı kullanılan çalışma kabinleridir. Laboratuvarlarda oluşan hava akımlarına karşı; numuneyi hava akımlarından HEPA filtre ile korumak amacıyla ve ayrıca sahip olduğu UV dezenfeksiyon sistemi sayesinde çalışma kabini içindeki mikrobiyolojik/biyolojik numunelerin uygulama öncesi ve sonrasında dekontaminasyonu sağlanmaktadır.

MİPRO MLAF Serisi Çalışma Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla Doğrusal (Laminer) Hava Akım (LAF) kabinler ile aynı prensiplerde çalışan ürün koruma amaçlı tasarlanmış cihazlardır.

MİPRO MLAF Serisi Çalışma Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla, kabin içinde çalışılan hava hareketleri ve yönlendirilmesi bir fan motoru aracılığı ile sağlanmaktadır.

MİPRO MLAF Serisi Çalışma Kabinleri, yüksek performanslı, kullanıcılar için optimal koşulları sağlayan güvenlik kabinleridir. Yatay veya dikey %99.995 verimliliğe sahip HEPA filtre kullanılmaktadır.

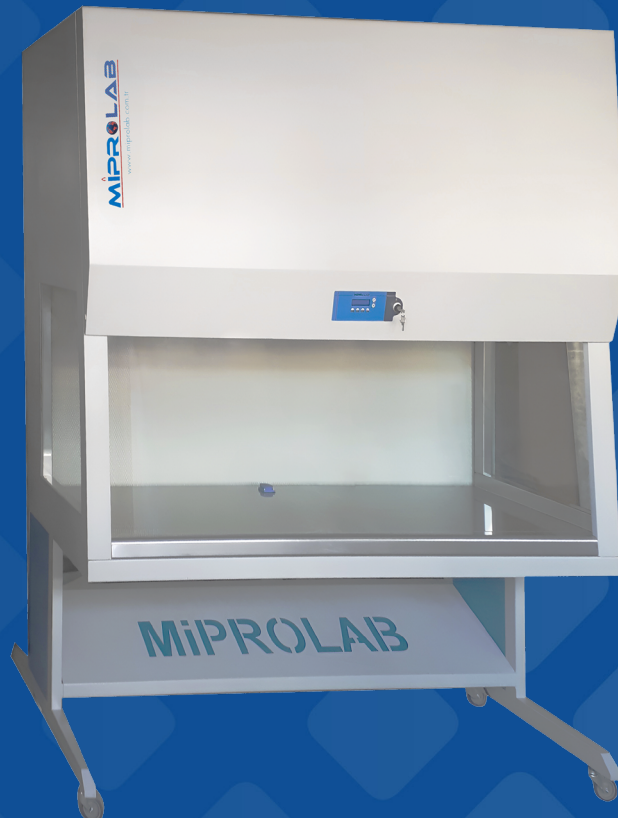

GÜÇLÜ VE EŞSİZ TASARIM

MLAF Laf Kabinleri, analiz hazırlıkları çalışmalarında moleküler reaktiflerin, karışımların veya steril kalması gereken diğer numunelerin kontaminasyondan korunmasını sağlayan hava-partikül yoluyla koruma cihazlarıdır.

MLAF Laf Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla Doğrusal (Laminer) Hava Akım (PCR) kabinler ile aynı prensiplerde çalışan ürün koruma amaçlı tasarlanmış cihazlardır.

MLAF Laf Kabinleri, HEPA filtre yardımıyla, kabin içinde çalışılan havanın tümünün tekrar dolanım (sirkülasyon) edilmeden filtre edilerek kabin dışına atılması prensibi ile çalışmaktadır. Kabin içi hava hareketleri ve yönlendirilmesi bir fan motoru aracılığı ile sağlanmaktadır.

AVANTAJLARI

- Kullanıcı dostu arayüz,
- Servis kolaylığı,
- Temizlemesi kolay paslanmaz çelik çalışma yüzeyi,
- Ergonomik çalışma için eğimli ön kısım,
- Optimal ışık yoğunluğu,
- Düşük gürültü seviyesi,
- Yüksek kalitede yapılandırılmış üretim,
- Destek standı.

	MLAF-90	MLAF-120	MLAF-150	MLAF-180
HEPA FİLTRE	≥ 0,3 µm Partiküller %99,995 Verimlilik (EN 1822'YE GÖRE H 14 SINIFI)			
ÖN FİLTRE	≥ 0,5 µm Partiküller İçin % 85 Verimlilik			
İÇ / DIŞ YÜZEY YAPISI	Paslanmaz Çelik / Elektrostatik Toz Boyalı Çelik Sac			
ÇALIŞMA TABLASI	304 Paslanmaz Çelik			
HAVA AKIŞ HIZI KONTROLÜ	LED / (OPSİYONEL) LCD Göstergeli Mikro İşlemcili Kontrol Sistemi			
AYDINLATMA	Yüksek Yoğunlukta, Düşük Güçte ≥ 800 Lüks			
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	<65 dB			
ÇALIŞMA VOLTAJİ	230 V - 50 Hz			
İÇ ÖLÇÜLER (mm)	895x570x580	1200x570x580	1505x570x580	1810x570x580
DIŞ ÖLÇÜLER (mm)	1000x1840x850	1305x1840x850	1610x1840x850	1915x1840x850
NET AĞIRLIK (kg.)	122	136	150	164
PAKETLİ AĞIRLIK (kg.)	132	147	162	177

CİHAZ BOYLARI AYAK DAHİL ÖLÇÜLERDİR, AYAK BOYU 740 MM'DİR.

**Özel istekleriniz için bilgi alabilirsiniz.*

OPSİYONEL İSTEKLER

- Özel Ölçü ve Özelliklerde Üretim (Ölçü/Yazılım/Program)
- 4.3 / 5.5 ve 7.2 İnç Ekran Seçenekleri.